


# 荷迪優皮贅舒 (HeltiQ Skintags) 使用說明

- 使用前請仔細閱讀本說明 - 本產品只供外用 -  
- 只適合成人和4歲以上兒童 - 基於冷凍療法，牽涉凍結皮贅 -

## 本產品說明包括

1. 荷迪優皮贅舒
2. 甚麼是皮贅
3. 使用說明
4. 治療後的護理
5. 潛在副作用
6. 禁忌
7. 警告

## 1. 荷迪優皮贅舒

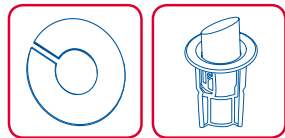

- 1 噴霧器一個，連塑膠蓋(內含38毫克二甲醚)
- 1 使用說明書一份
- 8 特製的圓形膠布8片
- 8 一次性棉頭塗藥器8個

## 2. 甚麼是皮贅



皮贅又稱軟垂疣、軟纖維瘤，英文學名 Acrochordons，雖然屬良性，非傳染性，但它們可以在任何時間生長在男性或女性身上，尤其容易長在腋下、脖子和胸脯下方。本產品只適宜用於上述部位。

### 皮贅有以下特點：

- 呈膚色
- 柔軟、不疼
- 容易前後移動
- 凸出
- 有一小蒂



## 注意!

一般情況下，單次的治療已可治癒。如果皮贅體兩周後不消失可重複治療。同一顆皮贅不能治療超過4次(治療之間需間隔兩個星期)。若四次治療都未能收到預期效果，建議向醫生求助。如果要處理大量皮贅聚集群，最好分別作個別治療。

## 3. 使用說明

切忌取下噴霧器上的塑膠蓋!



把圓形的膠布貼在需要治療的皮贅上，包圍皮贅



10秒後，可把棉頭塗藥器對準已用膠布蓋好的皮贅，兩者接觸，停留40秒。過程中可能出現微微的疼痛或刺痛感，乃正常反應，無需過份擔心。



取出一個棉頭塗藥器，安裝到塑膠蓋上並固定；將整個噴霧器倒轉，指向地面。此時別讓塗藥器接觸皮贅。



治療後，撕開膠布，也許會出現輕微的皮膚腫脹，之後會逐漸消失。通常，皮贅體會在治療後10-14天之內自然脫落。



噴霧器維持倒轉狀態，將它拿離你的身體，同時遠離他人。用姆指按動噴霧器底部4次，氣體便會自然流動到棉頭塗藥器。然後，維持噴霧器倒轉約10秒。



將已使用過的棉頭塗藥器從噴霧器拔出，丟棄，過程中別觸碰它。切記，棉頭塗藥器只供一次性使用，請勿重複使用。對付頑固的皮贅，你可能需要治療4次，但謹記每次治療需預留兩星期的間隔。每次治療請更換新的塗藥器。

如遇大量皮贅聚集群，每次治療不可超過二顆。切記，棉頭塗藥器是一次性，不能重複使用。每次治療請更換新的塗藥器。別用手指或皮膚觸碰用過的塗藥器，否則可能造成凍傷。

# 荷迪優皮贅舒 (HeltiQ Skintags) 使用說明

- 使用前請仔細閱讀本說明 - 本產品只供外用 -  
- 只適合成人和4歲以上兒童 - 基於冷凍療法，牽涉凍結皮贅 -

## 4. 治療後的護理

- 治療後可能有輕微疼痛、刺痛或皮膚腫脹，乃正常反應，無需過份擔憂，它們會逐漸消失。
- 若長水泡，請按平常處理水泡的方法處理。
- 治療後，撕開膠布，但不要觸碰或抓括治療部位。
- 保持治療部位的清潔
- 可以如平常般游泳、洗澡和淋浴，但避免刷洗治療部位。
- 當新的皮膚長好，皮贅便會自然脫落。

## 5. 潛在副作用

冷凍過程可能導致皮膚出現光斑或暗斑。這是低或過度色素沉著，是冷凍治療的副作用之一。這傾向於發生在本身有較多色素的皮膚上或使用不當。只要正確使用本產品，這些斑點會逐漸消失。胡亂使用本產品可導致灼傷、低或過度色素沉著、疤痕或其他皮膚損傷。如遇發炎或/及其他雜的狀況，請馬上求醫。

## 6. 禁忌

不要將荷迪優皮贅舒 (HeltiQ Skintags) 使用於：

- 如果不確定是否皮贅，或是有多顆皮贅長在同一位置或遍佈全身，使用前請諮詢醫生意見
- 臉和眼周圍的皮贅
- 臉、胸脯、脖子或臀部上的疣
- 皮膚癌患者，或曾經確診，和正在接受皮膚癌治療的人，請勿使用。這包括黑色素瘤、基底細胞癌硬化，或其他皮膚異常如角化病，因為這可能是皮膚癌的先兆
- 直徑大於4mm的皮贅，本產品不適用於個體較大的皮贅
- 顏色已變異，非膚色的皮贅
- 臀部上的皮贅及生殖器疣
- 色素過多的皮膚
- 有毛髮的皮贅
- 硬化的皮贅
- 出血的皮贅
- 過敏皮膚
- 對低溫過敏(會長凍類蕁麻疹)人士
- 糖尿病患者或血液循環障礙者，包括雷諾氏病
- 正接受免疫抑制治療，或確診患上自身免疫性疾病，或膠原疾病患者
- 正在服食抗凝血藥物和血友病患者
- 愛滋病患者
- 與其他治療皮贅的產品同時使用
- 4歲以下小童

## 7. 警告

- 勿讓兒童接觸，不適用於4歲以下小童
- 噴霧器為壓縮容器，切勿刺穿或燃燒。遠離火種和熱源
- 切勿取下或企圖取下噴霧器上的塑膠蓋子。
- 避免陽光直接照射或置於溫度超過 50°C/122°F的環境
- 別讓噴霧器及棉頭塗藥器接近火種和熱源。
- 使用產品時，請勿吸煙。請與燃燒中的香煙保持距離。
- 存放在陰涼及乾燥的地方。

若在懷孕或哺乳時使用本產品，要提前諮詢你的醫生。

## 問題及投訴：

如有任何問題或投訴，請聯絡港澳總代理



Produced by 製造商

Koninklijke Utermöhlen NV  
De Overweg 1, 8471 ZA Wolvega,  
The Netherlands  
www.skintags.com.cn

Sole Agent: HK & Macau 港澳總代理

RS Lifestyle Limited  
Unit 2301, 23/F., Greenfield tower,  
Concordia Plaza, 1 Science Museum Road,  
Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong  
Customer service (HK) hotline: +852 2620-6626

